

ИНСТРУКЦИЯ ПАСПОРТ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГЕНЕРАТОР СИНУСА
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДСТРОЙКОЙ
ЧАСТОТЫ



TGS-8A




УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА

Аппарат «ТГС-8А» представляет собой устройство, выполненное в прочном пластиковом корпусе. Внутри корпуса размещены электронный микропроцессорный блок управления аппаратом и генератор синусоидальных колебаний. Аппарат предназначен для домашнего использования.

Аппарат состоит из генерирующей синусоиду цепи с АПЧ, которая создает ток с частотой от 250 до 400 кГц, и резонансного контура, автоматически настроенного на частоту катушки.

На корпусе аппарата имеются кнопка включения с индикатором (1), кнопка переключения мощности с двумя индикаторами (2), кнопка переключения формы поля с индикатором (3) и кнопки управления таймером (4), над каждой из которых расположен светодиодный индикатор. Справа на панели имеется индикатор «нет поля» (5). Появление светодиодной индикации «нет поля» (5) укажет на наличие неисправности. В нижней части лицевой панели расположен таймер прибора (4), состоящий из четырех кнопок и индикаторов, соответствующих времени таймера: 5, 15, 30, 60 мин. В передней части корпуса аппарата имеется разъем для подключения катушки (6). Предусмотрена индикация уровня заряда аккумулятора «Батарея» (светодиоды) (7).

Разъем для подключения зарядного устройства 5 В, USB-C (8).

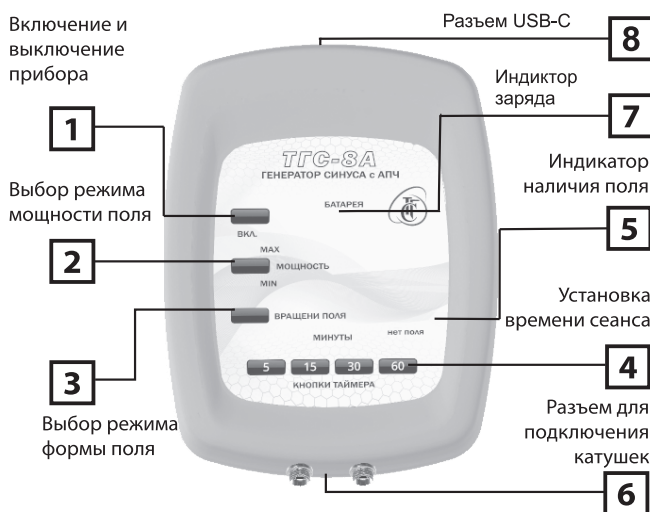

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ

Нажмите кнопку включения генератора (1) с обозначением «ВКЛ». Индикатор над кнопкой укажет на наличие питания. Генератор готов к работе.

Штекер катушки имеет паз, помеченный белой краской. Его необходимо совместить с соответствующим выступом гнезда.

Вставьте в разъемы генератора (6) штекер катушки. Выберите кнопкой (2) необходимую мощность (min-max) катушки. Индикаторы укажут выбранный режим. Установите кнопкой (3) необходимую форму сигнала: стоячая волна или вращающееся поле. Индикаторы укажут выбранный режим.

Выставьте нужный период времени работы генератора с помощью кнопок таймера (4). Индикаторы укажут выбранный режим: 5, 15, 30, 60 мин. При подключенной катушке должен погаснуть красный светодиодный индикатор «нет поля» (5).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель.....	ТГС-8А
Выходная частота:	250 - 400кГц
Минуты таймера:	5,15,30,60 минут
Питание.....	5В, 2А. (USB-C)
Емкость аккумулятора.....	5200 mAh (Li-Ion 18650)
Габариты аппарата, мм	190x150x100

ЗАРЯДКА АППАРАТА ТГС-8А

При подключении зарядного устройства к аппарату «ТГС-8А» загорается синий индикатор в области индикации заряда. Уровень заряда встроенного аккумулятора можно отслеживать по индикатору заряда (2). Во избежание искажения сигнала и паразитных пульсаций из сети не рекомендуется использовать аппарат при зарядке аккумулятора от розетки 220 В.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция аппарата обеспечивает надлежащую безопасность пользователя.

Запрещается пользоваться неисправным аппаратом.

При нарушении работоспособности аппарата или в аварийных ситуациях следует сразу же выключить аппарат.

Разборка и ремонт аппарата разрешаются только специалистам, имеющим необходимую квалификацию.

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +30 °С, относительная влажность до 80 %.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Аппарат должен храниться в складских помещениях при температуре воздуха от +5 °С до +45 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию, не допускается.

Транспортирование аппарата в транспортной таре может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта. При транспортировании самолётом аппараты должны быть размещены в отапливаемом герметичном отсеке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу аппарата при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

* Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи.

* Гарантийное обслуживание обеспечивает ООО «ТГС» при предъявлении паспорта с отметкой о приобретении и датой продажи.

* В случае выхода прибора из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока аппарат ремонтируется или заменяется за счёт изготовителя при предъявлении паспорта с отметкой о приобретении и датой продажи.

* При необходимости гарантийной замены или ремонта аппарата следует обращаться по месту его приобретения.

* Гарантийные обязательства прекращаются при наличии следов повреждения.

* В случае выхода из строя аппарата его необходимо отправлять в комплекте с катушками, которые вы использовали.

ТГС-8А оказывает оздоровительное воздействие и не является медицинским изделием (статья 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

Оздоровительное воздействие аппаратов не заменяет традиционные способы и схемы лечения. Для достижения эффекта рекомендуется консультация специалиста.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Генератор синуса «ТГС-8А» | 1 шт. |
| 2. Зарядное устройство 5В, 2А | 1 шт. |
| 3. Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 4. Индикатор | 1 шт. |
| 5. Сумка | 1 шт. |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Тольяттинский генератор синуса с автоматической подстройкой частоты «ТГС-8А» изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 26.60.13-004-45309611-2026, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признан годным для эксплуатации. Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.17414/26

Контролер

Дата выпуска

Производитель:



ООО «ТГС» г. Тольятти, ул. Ярославская д. 8, оф. 205

Бесплатный тел: 8 (800) 55-00-151 Телефон: 8 (937) 64-52-646

E-mail: tgs63@bk.ru

Сайт: <https://implovit.ru/>

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора не ухудшающие его технические и эксплуатационные характеристики, без уведомления потребителя.